


RAPID HEMOSTATIC Z-FOLD GAUZE - CELOX MEDICAL 1"X5' CELOX RAPID RIBBON HEMOSTATIC GAUZE

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Verbrauchsmaterial](#)

Zeit ist entscheidend, wenn es darum geht, schwere Verletzungen im Feld zu behandeln, und Zeitersparnis erhöht die Überlebenschance des Verletzten in einer Not- oder Gefechtssituation. Um in der Praxis effektiv zu sein, müssen hämostatische Verbände schnell wirken. Die flache Verpackung bedeutet, dass das Celox Rapid Ribbon leicht verborgen werden kann, und die reduzierte Größe macht es ideal für die Behandlung von schmalen Eintrittswunden wie Schuss-, Splitter- und Stichverletzungen. Funktioniert mit nur 60 Sekunden Druck. Stoppt schwere Blutungen – schnell. Schnelle Wirkung reduziert den Blutverlust. Stoppt hypothermische Blutungen, wie sie bei schweren traumatischen Verletzungen vorkommen. Die aktuelle Generation hämostatischer Mittel benötigt mindestens 3 Minuten Druck, um zu wirken. Das Celox Rapid Ribbon Gauze beseitigt die Verzögerung, indem die Packzeit beschleunigt und die Druckzeit auf nur 60 Sekunden reduziert wird, während die bewährte hämostatische Technologie von Celox verwendet wird.

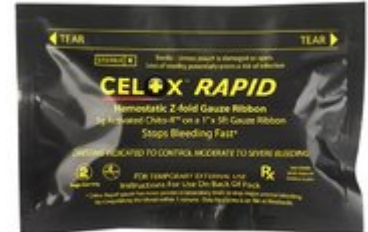

Eigenschaften

- Name: [CELOX MEDICAL 1"X5' CELOX RAPID RIBBON HEMOSTATIC GAUZE](#)
- Hersteller: [CELOX MEDICAL](#)
- Artikel-Nr.: 100025883
- Herst.-Nr.: TS-ZR-015
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 755702981842

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE CELOX MEDICAL](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE CELOX MEDICAL

Einführung

Die RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE CELOX MEDICAL ist ein innovatives Produkt zur schnellen Blutstillung bei schweren Verletzungen. Es ist entscheidend, die Sicherheit bei der Anwendung dieses Produkts zu gewährleisten, um die bestmöglichen Ergebnisse in Notfallsituationen zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt unbeschädigt und innerhalb des Haltbarkeitsdatums ist, bevor du es verwendest.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informiere dich über die richtige Anwendung des Produkts, um Verletzungen oder ineffektive Nutzung zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Anwendung

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck: zur Kontrolle von schweren Blutungen.
- Achte darauf, dass die Wunde sauber ist, bevor du das Produkt anwendest.
- Wende den Druck gleichmäßig an und halte ihn für die empfohlene Zeit von 60 Sekunden aufrecht.
- Bei schwerwiegenden Verletzungen oder wenn die Blutung nicht aufhört, suche sofort medizinische Hilfe auf.
- Vermeide den Kontakt mit offenen Wunden, um Infektionen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe die Verpackung auf Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass du alle benötigten Materialien zur Hand hast.

2. Anwendung:

- Öffne die Verpackung vorsichtig, ohne das Produkt zu beschädigen.
- Lege das Celox Rapid Ribbon direkt auf die blutende Wunde.
- Übe gleichmäßigen Druck auf die Wunde aus und halte diesen für 60 Sekunden.
- Achte darauf, dass das Produkt gut haftet und die Blutung stoppt.
- Wenn nötig, fixiere das Produkt mit einem Verband oder Tape.

3. Nach der Anwendung:

- Überprüfe die Wunde regelmäßig auf Anzeichen einer erneuten Blutung.
- Suche bei Bedarf medizinische Hilfe auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Verpackungen und nicht verwendete Teile sollten sicher verpackt und in den regulären Müll gegeben werden, sofern sie nicht als gefährlicher Abfall klassifiziert sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Produkts, kontaktiere bitte den Hersteller oder den Vertriebspartner, bei dem das Produkt erworben wurde.

Diese Sicherheitsanweisungen sind wichtig, um die sichere Verwendung des RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE CELOX MEDICAL zu gewährleisten. Bitte befolge alle Anweisungen sorgfältig, um die bestmögliche Wirksamkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at